


PHILIPS REMSTAR PLUS C-FLEX W/SD CARD

CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

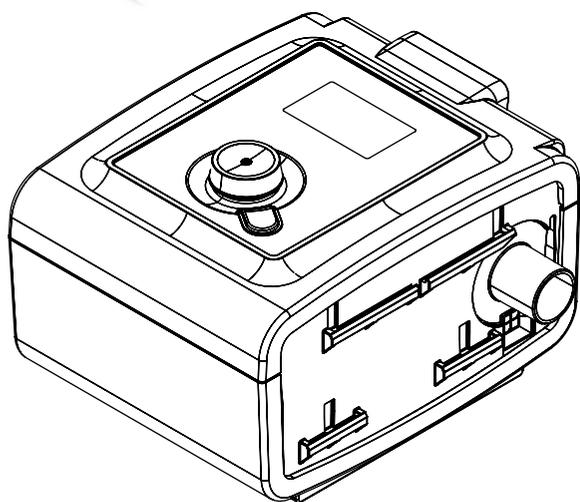

La **PHILIPS REMSTAR PLUS C-FLEX** è una soluzione intelligente per il trattamento dei disturbi respiratori del sonno. Può essere usata con qualsiasi tipo di maschera.

Il Sistema di terapia del sonno **PHILIPS REMSTAR PLUS C-FLEX** si adatta alle necessità sulla base del singolo atto respiratorio erogando un'adeguata pressione in base al flusso all'inizio dell'espirazione, per poi tornare alla pressione terapeutica appena prima della fine dell'espirazione.

- "Auto-Trial Mode" prevede che il dispositivo funzioni come una Auto CPAP fino a 30 giorni, dopo i quali il dispositivo passerà in automatico in "CPAPCheck mode" ad una pressione di terapia pari al 90% calcolato durante il periodo in Auto-Trial.
- "CPAP-Check mode" monitora e valuta i pazienti in finestre temporali di 30 ore per determinare se la pressione di terapia è ottimale; se così non fosse, il dispositivo aggiusterà in automatico la pressione di terapia con cambiamenti di 1 cm H₂O fino a raggiungere quella ottimale.
- Umidificazione con tubo riscaldato eroga l'umidità ottimale per il massimo comfort del paziente.
- "Opti-Start" migliora la terapia di Auto-CPAP, calcolando la pressione ottimale di partenza.
- PS min regolabile garantisce al personale medico specializzato maggiori possibilità per l'adattamento dei pazienti alla terapia bi-level.

Caratteristiche: rampa regolabile, regolazione altitudine automatica, auto-Trial Mode, umidificazione con tubo riscaldato, peso: 1,36 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	18 cm L x 14 cm P x 10 cm H
Peso	1,36 kg
Avvio di pressione rampa	da impostazione 4
Tempo di rampa	da 0 a 45 min
Compensazione automatica altitudine	2286 m
Alimentazione	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12volt DC
Rumorosità	29 dB